

# 単品系装具

## 補助製品の収集



ストーマ装具、汚物処理袋、粘着剥離剤、洗浄用微温湯、ティッシュまた不織布を用意します。必要時: ハサミ、ペン、ストーマゲージ、アクセサリ。

## 使用済みのストーマ装具の除去



皮膚をそっと押さえて面板から剥がしながら、接着剤の外縁部をゆっくりと持ち上げて下向きに剥がします。使用済みの装具を適切に処理します。トイレに流さないでください。

## 皮膚の洗浄および乾燥



医療専門家の推奨に従って、水または刺激の少ない石鹸を使用して皮膚を洗浄します。洗い流して水分を拭き取ります。皮膚にオイル、パウダー、ローションまたはローションタイプの石鹸を使用しないでください。

## 皮膚の状態の確認



ストーマ周囲の皮膚が、炎症、発疹、発赤がなく、無傷であることを確認します。\*

\*炎症、発疹、発赤がある場合は、医療従事者にご相談ください。


## 面板とストーマ袋の準備



面板を貼付する前に、ストーマゲージを使用して、ストーマのサイズを測定します（プレカットタイプの面板を使用している場合は、ステップ 7 に進みます）。



保護剤の開口部の該当するサイズを面板にトレースします。面板は、皮膚とストーマが接している部分にフィットする必要があります。漏れや皮膚の炎症を防ぐために、面板とストーマの間に皮膚が見えていないことを確認します。

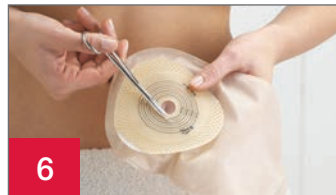

わん曲ハサミを使用して、パターンに合うように面板の開口部を注意深くカットします。剥離ライナーの線の外をカットしないでください。パウチに穴を開けないでください。



剥離紙を面板から剥がします。

## 用手成形皮膚保護剤の追加 (必要な場合)



該当する場合、使用説明書に従って、開口部の周囲に保護リングを貼り付けるか、薄いペーストを塗布します。

## 新しいストーマ装具の装着




面板の開口部とストーマの中心を合わせて置きます。



約 1 分間面板をそっと押さえて密着させます。



面板の周囲にテープが付いている場合は、両側の裏紙を剥がし、皮膚にテープ部分を沿わせませす。

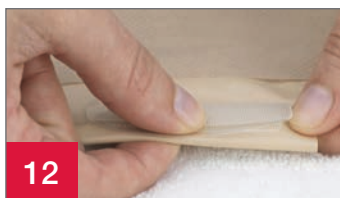

12

排出口を閉めます。排出型パウチを使用している場合は、パウチの下部にあるロックンロール マイクロシール クロージャーを閉めるか、ドレイン ストッパーを装着します。このクロージャー システムの使用の詳細については、「ロックンロール マイクロシール クロージャー ケアに関するヒント」を参照してください。



尿路用装具を使用している場合は、排出口が閉じられていることを確認します。排出口の涙の形がストーマ袋の身体側に向いている必要があります。

必要に応じて、同梱されているキャップを装着します。

## 単品系装具

ヒント	製品のリスト	製品番号
<ul style="list-style-type: none"><li>ストーマ周囲の皮膚に、発疹やかぶれがないか確認する必要があります</li><li>皮膚に炎症がある場合は、医療従事者にご相談ください</li><li>用手成形皮膚保護剤やペーストを使用している場合は、医療従事者の指示に従い、ストーマ近接部や面板に追加します</li><li>手術後、ストーマに浮腫がみられる場合があります。ストーマが一定のサイズに縮小するまでに、数週間または数か月かかる場合があります</li><li>ストーマを洗浄する際、わずかに出血する場合があります</li><li>皮膚保護ワンプを使用すると、装着期間が短くなる可能性があるため、長期の面板の装着ではお勧めしません</li></ul>	<b>単品系装具</b>	_____
	<b>アクセサリ</b>	
	用手成形皮膚保護剤	_____
	ストーマ ベルト	_____
	ペースト	_____
	消臭潤滑剤	_____
	ストーマパウダー	_____
その他 _____	_____	

## その他の説明

---

---

---

---

---

---

---

---

皮膚の水分を十分に拭き取ってから、面板を貼付してください。

使用する前に、使用目的、禁忌、警告、注意事項、および使用方法について使用説明書を必ずお読みください。

Hollister のロゴ、ロックンロール、および「健康な肌から、より良い毎日を支える。」は Hollister Incorporated の商標です。  
© 2022 Hollister Incorporated. 923069-1118 ANZ Japanese-1P

Hollister Australia  
PO Box 375,  
Box Hill, VIC 3128  
[www.hollister.com.au](http://www.hollister.com.au)

Customer Care  
1800 880 851  
[priority@hollister.com.au](mailto:priority@hollister.com.au)

Hollister New Zealand  
PO Box 107097,  
Auckland Airport, Auckland 2150  
[www.hollister.co.nz](http://www.hollister.co.nz)

Customer Care  
0800 678 669  
[NZCustomerService@libmed.co.nz](mailto:NZCustomerService@libmed.co.nz)