
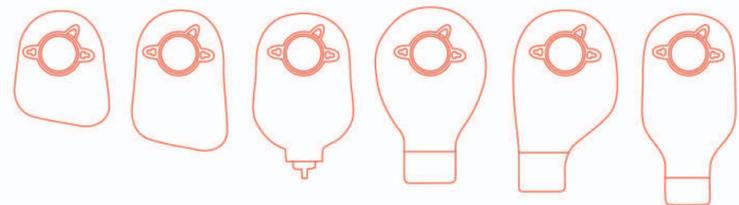
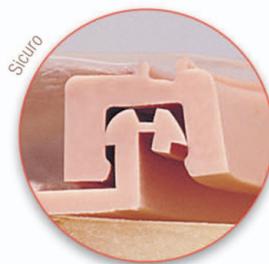


Flangia Flottante

Flessibile e sicura

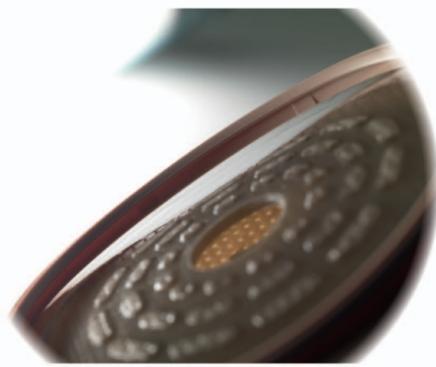

Il sistema per stomia Conform 2 offre una scelta di sacche per ogni tipo di stoma, tutte realizzate in uno speciale materiale anti-fruscio e tutte con il lato corpo rivestito in delicato tessuto per un tocco confortevole sulla pelle.

Sacche Chiuse

Con il filtro AF300 che evita perdite e rigonfiamento.

Sacche Aperte

La chiusura Lock'nRoll Microseal garantisce sicurezza, discrezione e comfort all'utilizzatore

Sacche Urostomia

Con l'esclusivo scarico di sicurezza, igienico e pratico, con tappino extra a prova di goccia.

Facilità d'uso

- Flangia Flottante per un facile fissaggio a pressione
- Drenaggio rapido, igienico, facile

Comfort e discrezione

- Filtro AF300
- Film anti odore e anti rumore
- Flangie di fissaggio sacca/placca a profilo ultra sottile

Sicurezza

- Doppio fissaggio CenterPointLock contro il distacco accidentale
- Click di conferma chiusura

Scelta di placche

- Idrocolloide SoftFlex per massima protezione della pelle
- Idrocolloide FlexWear per lunga durata in uso
- Idrocolloide FormaFlex pratico e sicuro senza uso di forbici

Conform 2

Sistema due pezzi per stomia

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche standard Cod. CND A100201			
SoftFlex			
Flottante lavabile	35 mm	13-20 mm	23200
	45 mm	13-30 mm	24200
	55 mm	13-40 mm	25200
	70 mm	13-55 mm	27200
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.05.003 colo e ileostomia Codice ISO 09.18.08.003 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche convesse Cod. CND A100201			
FlexWear			
Flottante	45 mm	13-25 mm	24300
	55 mm	13-38 mm	25300
	70 mm	13-51 mm	27300
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.05.006 colo e ileostomia Codice ISO 09.18.08.006 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche con bordo adesivo Cod. CND A100201			
FlexWear			
Flottante	35 mm	13-20 mm	33500
	45 mm	13-30 mm	34500
	55 mm	13-40 mm	35500
	70 mm	13-55 mm	37500
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.05.003 colo e ileostomia Codice ISO 09.18.08.003 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche con bordo adesivo convesse Cod. CND A100201			
FlexWear			
Flottante	45 mm	13-25 mm	34600
	55 mm	13-38 mm	35600
	70 mm	13-51 mm	37600
	Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.05.006 colo e ileostomia Codice ISO 09.18.08.006 urostomia		

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche con bordo adesivo riconducibili a convesse Cod. CND A100201			
FormaFlex			
Flottante	45 mm	fino a 32 mm	34700
	55 mm	fino a 43 mm	35700
	70 mm	fino a 57 mm	37700
	Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.05.006 colo e ileostomia Codice ISO 09.18.08.006 urostomia		

	Ø Flangia	Articolo
Sacche Chiuse per Colostomia Cod. CND A100202		
Midi		
Opaca	45 mm	24400
	55 mm	25400
	70 mm	27400
Trasparente	45 mm	24500
	55 mm	25500
	70 mm	27500
Confezione da 30 pezzi Codice ISO 09.18.05.009		

	Ø Flangia	Articolo
Maxi		
Opaca	45 mm	24420
	55 mm	25420
	70 mm	27420
Trasparente	45 mm	24520
	55 mm	25520
	70 mm	27520
Confezione da 30 pezzi Codice ISO 09.18.05.009		

	Ø Flangia	Articolo
Sacche Aperte per Ileostomia Cod. CND A100203		
Mini con Lock 'n Roll Microseal		
Opaca	45 mm	24743
	55 mm	25743
Confezione da 30 pezzi Codice ISO 09.18.05.012		

	Ø Flangia	Articolo
Midi con Lock 'n Roll Microseal		
Opaca	35 mm	23750
	45 mm	24750
	55 mm	25750
Confezione da 30 pezzi Codice ISO 09.18.05.012		

	Ø Flangia	Articolo
Midi con clamp		
Opaca	35 mm	23720
	45 mm	24720
	55 mm	25720
Trasparente	35 mm	23820
	45 mm	24820
	55 mm	25820
Confezione da 30 pezzi + 6 morsetti anatomici Premium Codice ISO 09.18.05.012		

	Ø Flangia	Articolo
Maxi con Lock 'n Roll Microseal		
Opaca	35 mm	23760
	45 mm	24760
	55 mm	25760
	70 mm	27760
Trasparente	45 mm	24860
	55 mm	25860
	70 mm	27860
	Confezione da 30 pezzi Codice ISO 09.18.05.012	

	Ø Flangia	Articolo
Maxi Post-Op con clamp senza filtro		
Trasparente	70 mm	27600
Confezione da 10 pezzi + 1 morsetto Codice ISO 09.18.05.012		

	Ø Flangia	Articolo
Sacche per Urostomia Cod. CND A100204		
Opaca	35 mm	23830
	45 mm	24830
	55 mm	25830
	70 mm	27830
Confezione da 10 pezzi + 10 tappini esterni di sicurezza + 1 adattatore per sacche raccolta urina Codice ISO 09.18.08.009		



Hollister SpA
Strada 4 Palazzo A/7
20090 Milanofiori - Assago
Tel. 02.8228181
Fax 02.82281877
servizio.pazienti@hollister.com
www.hollister.it

Per informazioni Numero Verde 800-836088
Telefonata gratuita - Servizio attivo dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 17.00

CE Hollister e logo, Conform 2, Lock 'n Roll, Microseal, AF300, SoftFlex, FlexWear e FormaFlex sono marchi registrati da Hollister Incorporated.
©2014 Hollister Incorporated. 437-1105

ITH004



Conform 2

Sistema due pezzi per stomia



Reservato esclusivamente agli operatori sanitari del settore

Conform 2

Sistema due pezzi per stomia



Sicurezza e comfort, senza compromessi

Hollister offre una serie di soluzioni altamente funzionali per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con una stomia. Il nostro ricco assortimento risponde al meglio ad ogni necessità.



SoftFlex

Comfort e protezione della cute


- Delicato sulla pelle, consente cambi frequenti
- Forma e spessore della placca assicurano la flessibilità ideale senza ridurre la sicurezza
- Durata in uso normale



FlexWear

Resistenza e flessibilità

- Unisce durata in uso e delicatezza, quindi il cambio placca può avvenire con maggior o minor frequenza
- Resiste all'erosione e mantiene la forma anche in presenza di fluidi
- Durata in uso normale/extra

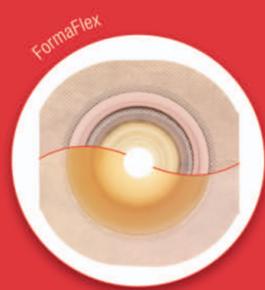

FormaFlex

Semplice e sicura

- Non richiede forbici
- Delicata sulla cute
- Estremamente confortevole e pratica
- Ideale per tutte le esigenze



Convex

Specifica per la retrazione

- Alta resistenza agli escreti: perfetta tenuta e lunga durata in uso
- Si adatta al profilo addominale per il massimo comfort
- Mantiene integra la cute


Lock 'n Roll

Chiusura con Microseal

La sicurezza è semplice

La chiusura integrata Lock 'n Roll Microseal contiene migliaia e migliaia di micro sigilli autobloccanti. Premendoli, le barrette di chiusura aderiscono perfettamente tra loro. Tecnologia esclusiva - massima resistenza all'acqua e alla pressione garantita!

L'aletta di sicurezza trasparente è facile da aprire e chiudere, e permette di controllare la chiusura.

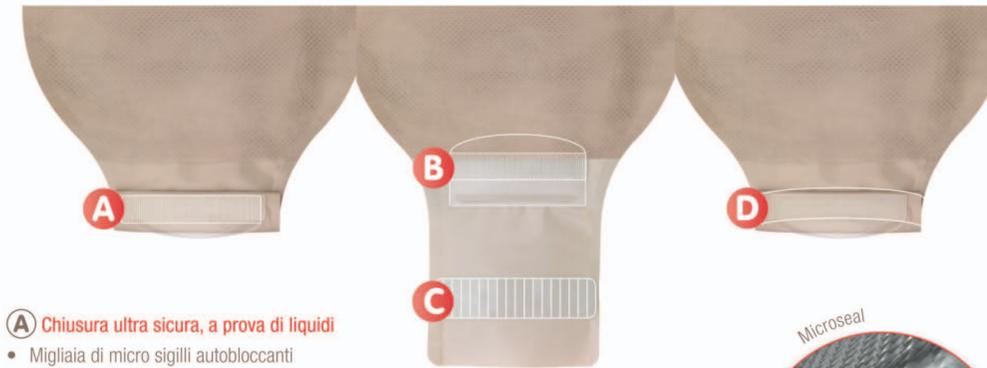

A Chiusura ultra sicura, a prova di liquidi


- Migliaia di micro sigilli autobloccanti
- Sicurezza provata contro liquidi, pressione, trazione accidentale

B C Aletta di sicurezza e rinforzi flessibili - NUOVI

- L'aletta di sicurezza non interferisce con svuotamento e pulizia
- I rinforzi flessibili permettono di controllare il flusso e facilitano la pulizia

D Disegno anatomico

- Confortevole: segue la forma del corpo
- Le dimensioni dei Microseal assicurano massima efficacia in un profilo ultrasottile

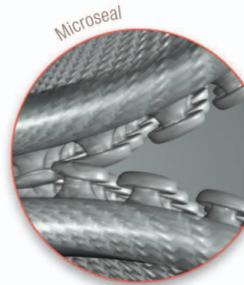

Aprire

Basta aprire l'aletta per sbloccare la chiusura con Microseal, supersicura e silenziosa!



Svuotare

Svuotare la parte inferiore della sacca: i rinforzi flessibili assicurano controllo del flusso. Premere sulle estremità laterali per rilasciare il contenuto.



Pulire

Aprire l'apertura premendo sulle estremità laterali: i rinforzi flessibili facilitano la pulizia.



Chiudere


Arrotolare, premere la chiusura tra il pollice e le dita, dal centro ai bordi, per bloccare la chiusura con Microseal.

AF300

Filtro

Una generazione più avanti

Veloce ed efficace grazie all'ampia superficie attiva filtrante: niente più rigonfiamenti ed odori. Protezione attiva contro i liquidi garantita da doppia membrana di sicurezza interna ed esterna.

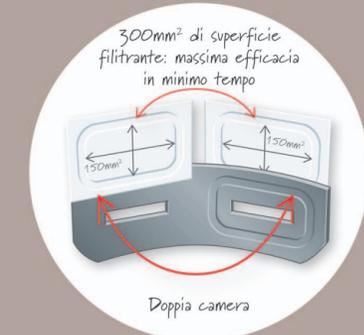

Veloce



Uscita con membrana di protezione
Depurazione a carbone attivo
Ingresso con membrana di protezione



Le molecole depurate passano attraverso la membrana di protezione
Le molecole con cattivo odore vengono inattivate dal sistema attivo del filtro
● molecole depurate ▲ molecole con cattivo odore

Niente odori



I liquidi e solidi vengono bloccati all'interno



L'acqua e l'umidità all'esterno vengono respinte - senza coprifiltro!

Protezione attiva